

Mod. st-blp

SCHEDA TECNICA

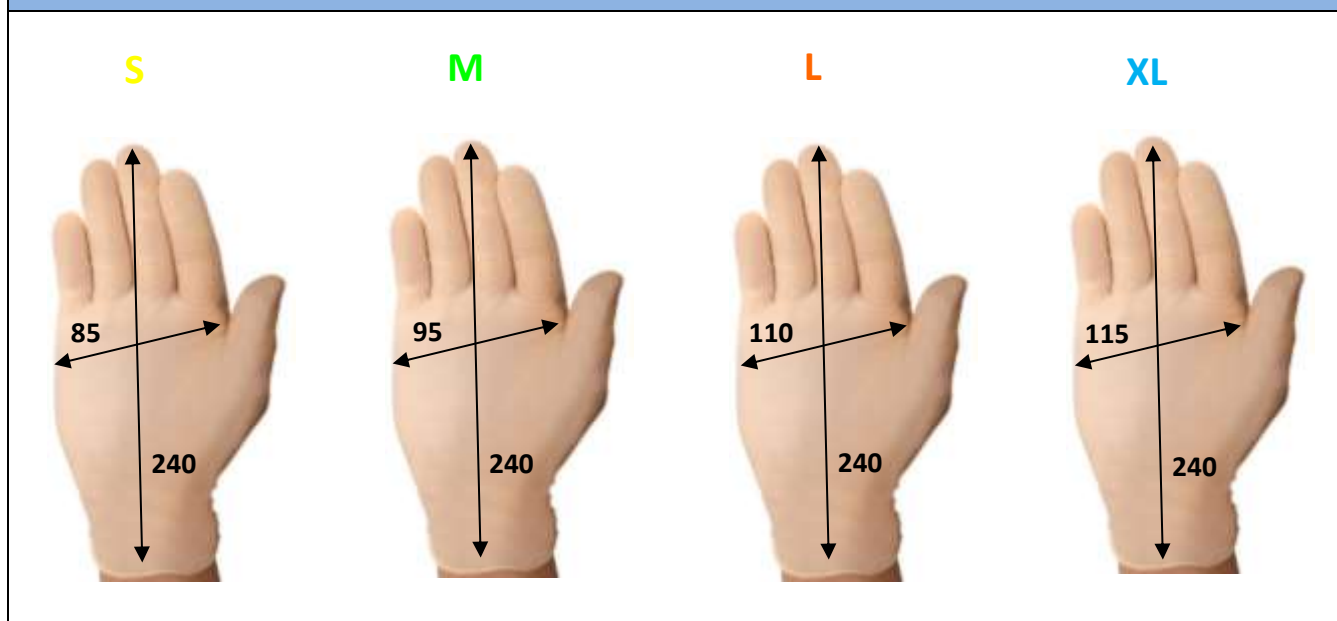
Rev 0.04/06/2018

CODICI

Marchio	Safe Vinil Powder Free Flex			
Descrizione	100 guanti monouso in vinile senza polvere, elasticizzati, non sterili, ambidestri con polsino salva strappo. Superficie liscia. AQL: 1.0. In box.			
Fabbricante	Bluline S.r.l.			
Taglie disponibili	S	M	L	XL
Codice articolo	GUV312BLS	GUV312BLM	GUV312BLL	GUV312BLXL
Codice EAN articolo	8057013190084	8057013190107	8057013190121	8057013190145
Codice EAN cartone	8057013190091	8057013190114	8057013190138	8057013190152
Repertorio D.M. n°	1316204/R	1316215/R	1316216/R	1316219/R

DATI TECNICI

Confezione da	100 guanti			
Materiale del guanto	PVC (cloruro di polivinile)			
Spessore del guanto (single wall)	0,07 mm (polso) - 0,09 mm (palmo) - 0,09 mm (dito)			
Dimensioni del guanto	85 x 240 (h) mm	95 x 240 (h) mm	110 x 240 (h) mm	115 x 240 (h) mm
Peso del guanto	4,5 g ± 0,2g	5,0 g ± 0,2g	5,5 g ± 0,2g	6,0 g ± 0,2g
Colore del guanto	Crema			
Dimensioni della confezione	123 x 66 x 216 (h) mm			
Peso della confezione	520 g ± 5%	570 g ± 5%	620 g ± 5%	670 g ± 5%
Materiale della confezione	Cartoncino greyback			

FOTO PRODOTTO CON MISURE

Bluline S.r.l.

 Località Ritonda, 100 - 37047 San Bonifacio (VR), Italia - P. IVA 03103090969
 Tel.: +39 045 6173999 - Fax: +39 045 6173990 - www.blulinesrl.it - professional@blulinesrl.it

INFORMAZIONI																												
Note	Guanti in vinile (PVC) elasticizzato "stretch", monouso non sterili da esame, colore creamy. Senza polvere. Superficie liscia. Ambidestri con polsino salva strappo. Privi di lattice di gomma naturale, eliminano il rischio di reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale. Con proprietà antiaderenti conferite da un rivestimento impermeabile in poliuretano idroveicolato.																											
Utilizzo	Esaminazione, esplorazione, terapia, diagnostica, nell'ambito della casa e della collettività, per la manipolazione di alimenti, catering, estetica, pulizia e igiene, hobbistica, laboratori, settore medico-veterinario.																											
Validità	5 anni dalla data di produzione																											
Destinazione d'uso	Dispositivo di protezione di categoria III* : guanti di protezione a cinque dita contro prodotti chimici e microorganismi, da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi del Regolamento UE 2016/425). Livello di protezione tipo B. Dispositivo Medico : guanti medicali, da esame, monouso, non sterili in vinile, senza polvere. In Classe I ai sensi Allegato IX della Direttiva 2007/47/CE, in quanto dispositivo invasivo ad uso temporaneo in relazione agli orifizi del corpo.																											
(CND) Classificazione Nazionale dei DM	T01020299 ai sensi D.M. Min. Salute del 22.9.2005																											
Standard normativi	<ul style="list-style-type: none"> • Idoneità al contatto breve con alimenti ai sensi del Regolamento CE 1935/2004 (e similari). Olii, grassi ed idrocarburi esclusi per 2h a 40°C; • Materie Prime/ Materiale di fabbricazione e manifatturazione a norme US FDA & Linee Guida GMP; • Prodotto in stabilimenti certificati EN ISO 9001 & EN ISO 13485; • Conformità ai requisiti essenziali del Regolamento UE 2016/425; • Conformità a norme EN ISO 374-1:2016 e EN ISO 374-5:2016 (guanti protettivi contro batteri e funghi e virus); • Conformità a norme EN 420:2003 + A1 2009; • Conformità a norme EN 455 parte I, II, III; • Piano di Campionamento secondo norme ISO 2859; • Test di Biocompatibilità secondo norme ISO 10993. 																											
Proprietà	<p>Biocompatibilità Prova d'Irritazione Primaria su Conigli (ISO 10993-10) con esito non irritante. Test di Sensibilizzazione Cutanea su maialini di Guinea (ISO 10993-10) con esito negativo.</p> <p>Protezione dai virus secondo requisiti EN 374-5:2016 Prova di protezione dai virus Phi-X174 batteriofago (ISO 16604:2004): non rilevabile (< 1 PFU/mL)</p> <p>AQL per microfori AQL 1.0 per ispezione secondo norma UNI EN 455 Parte 1 e Piano di campionamento secondo norma ISO 2859 (Livello d'Ispezione Generale G1) AQL <1.5 per ispezione secondo norma UNI EN 374 Parte 2 e Piano di campionamento secondo norma ISO 2859 (Livello d'Ispezione Generale G1)</p> <p>AQL per difetti visibili AQL 2.5 per difetti maggiori, AQL 4.0 per difetti minori. Piano di campionamento ISO 2859 livello d'ispezione G1</p> <p>AQL per dimensioni AQL 4.0 Piano di campionamento ISO 2859 livello d'ispezione S-2</p> <p>Carico di rottura (N): 6 N prima invecchiamento, 5,4 dopo invecchiamento</p> <p>Allungamento (%): prima invecchiamento 400%, dopo invecchiamento 350%</p> <p>Residui additivi chimici: TMTD, MBT, ZMBT, ZDEC, ZDMC, ZPMC, ZDBC, BHT, BHA: assenti o al di sotto delle soglie di rilevabilità</p>																											
Protezione offerta	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Misure</th> <th>Test Superati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">EN 420:2003 + A1 2009 (Requisiti generali per i guanti)</td> <td>Indossabilità</td> <td>Test Superati</td> </tr> <tr> <td>Destrezza</td> <td>Classe 5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">EN 374-2:2014 (Determinazione della resistenza alla penetrazione)</td> <td>Tenuta all'aria</td> <td>Test Superati</td> </tr> <tr> <td>Tenuta all'acqua</td> <td>Test Superati</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">EN 374-3:2003/AC 2006 (Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici)</td> <td>Dietilammina (Cod. G)</td> <td>Classe 2</td> </tr> <tr> <td>Idrossido di Sodio al 40% (Cod. K)</td> <td>Classe 3</td> </tr> <tr> <td>Acido Solforico al 96% (Cod. L)</td> <td>Classe 2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">EN 374-4:2013 (Determinazione della resistenza alla degradazione dei prodotti chimici)</td> <td>Dietilammina (Cod. G)</td> <td>75,9% di degradazione</td> </tr> <tr> <td>Idrossido di Sodio al 40% (Cod. K)</td> <td>52,3% di degradazione</td> </tr> <tr> <td>Acido Solforico al 96% (Cod. L)</td> <td>100% di degradazione</td> </tr> </tbody> </table>		Misure	Test Superati	EN 420:2003 + A1 2009 (Requisiti generali per i guanti)	Indossabilità	Test Superati	Destrezza	Classe 5	EN 374-2:2014 (Determinazione della resistenza alla penetrazione)	Tenuta all'aria	Test Superati	Tenuta all'acqua	Test Superati	EN 374-3:2003/AC 2006 (Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici)	Dietilammina (Cod. G)	Classe 2	Idrossido di Sodio al 40% (Cod. K)	Classe 3	Acido Solforico al 96% (Cod. L)	Classe 2	EN 374-4:2013 (Determinazione della resistenza alla degradazione dei prodotti chimici)	Dietilammina (Cod. G)	75,9% di degradazione	Idrossido di Sodio al 40% (Cod. K)	52,3% di degradazione	Acido Solforico al 96% (Cod. L)	100% di degradazione
	Misure	Test Superati																										
EN 420:2003 + A1 2009 (Requisiti generali per i guanti)	Indossabilità	Test Superati																										
	Destrezza	Classe 5																										
EN 374-2:2014 (Determinazione della resistenza alla penetrazione)	Tenuta all'aria	Test Superati																										
	Tenuta all'acqua	Test Superati																										
EN 374-3:2003/AC 2006 (Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici)	Dietilammina (Cod. G)	Classe 2																										
	Idrossido di Sodio al 40% (Cod. K)	Classe 3																										
	Acido Solforico al 96% (Cod. L)	Classe 2																										
EN 374-4:2013 (Determinazione della resistenza alla degradazione dei prodotti chimici)	Dietilammina (Cod. G)	75,9% di degradazione																										
	Idrossido di Sodio al 40% (Cod. K)	52,3% di degradazione																										
	Acido Solforico al 96% (Cod. L)	100% di degradazione																										
Avvertenze per l'uso e lo stoccaggio	<p>Il guanto deve essere indossato prima dell'inizio dell'attività operativa. La scelta del guanto deve essere effettuata conoscendo l'attività lavorativa ed il processo di lavorazione eseguito dall'operatore, tenendo in considerazione le condizioni di lavoro e rischi connessi;</p> <p>Non utilizzare i guanti in contatto con il prodotto chimico testato per periodi superiori a quelli relativi al livello di prestazione (0 < 10 min.; 1 > 10 min.; 2 > 30 min.; 3 > 60 min.; 4 > 120 min.; 5 > 240 min.; 6 > 480 min.);</p> <p>Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità;</p> <p>Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore. Effettuare sempre una prova preliminare nelle reali condizioni di utilizzo;</p> <p>Non utilizzare i guanti in contatto con i prodotti chimici non testati o con prodotti irritanti e corrosivi.</p> <p>Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite. Il prodotto non necessita di schede di sicurezza.</p>																											
Smaltimento	Il dispositivo, al termine del suo utilizzo, deve essere trattato secondo le vigenti normative in materia in funzione del campo di applicazione in cui è stato impiegato.																											